


Уважаеми Клиенти,

Ефективното лечение на сънната апнея е от изключителна важност за Вашето здраве и качество на живот. Ето защо екипът ни, с помощта на Уебмоушън ООД, създаде за Вас интернет-базирано приложение за проследяване на терапията с апаратите Somnoblance / Weinmann. С негова помощ Вие ще можете сами да следите параметрите на терапията си и при необходимост да се консултирате с Вашия лекуващ лекар.

За целта следвайте описаните по-долу стъпки:

1. Отидете на адрес www.cpap-bulgaria.com/cpap или кликнете с мишката върху „проверка на терапията” на заглавната страница на нашия интернет сайт www.cpap-bulgaria.com

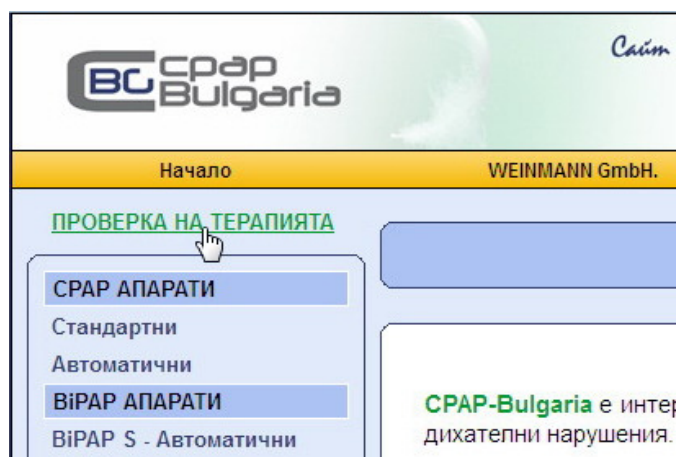

2. Регистрирайте се, като посочите имената на лечебното заведение и лекаря, провел Вашето изследване за сънна апнея;
3. Влезте в приложението с избраните от Вас потребителско име и парола;

Вход	Излязохте успешно. Можете отново да влезете
Регистрация	

[? Инструкции](#)

Потребителско име:

Парола:

Copyright © 2013 Сън и Здраве ЕООД

4. Поставете SD-картата от Вашия CPAP апарат Somnoblance в четящото устройство на Вашия компютър или лаптоп;



5. От менюто в ляво изберете „Качи файл с отчет“, след това натиснете „Качи .CSV файл с отчет“ > “Browse / Търсене” > посочвате пътя до SD картата и избирате файл WM_DIARY.CSV > натискате “Качи файл”.

Табло
 Качи файл с отчет
 Преглед на отчети
 Продължителност на терапията
 Терапия с овлажнител
 Дихателни нарушения
 Налягане
 Терапия с повишен теч от маската
 Таблични данни

Файлове с отчети за потребител

No file selected.


Качени файлове с отчети за потребител :

Отчет за потребител	Качен на дата
Няма са намерени файлове, до които имате достъп.	

6. В списъка „Качени файлове с отчети“ се появява новият файл. Натиснете „Преглед на отчет“

7. От менюто в ляво можете да навигирате между най-важните параметри на терапията: продължителност на терапията, дихателни нарушения, терапевтично налягане, терапия с повишен теч от маската. При отклонение от нормите показателите се оцветяват в различен цвят (вижте легендата под всяка графика).

Отчет: "Терапия с повишен теч от маската"

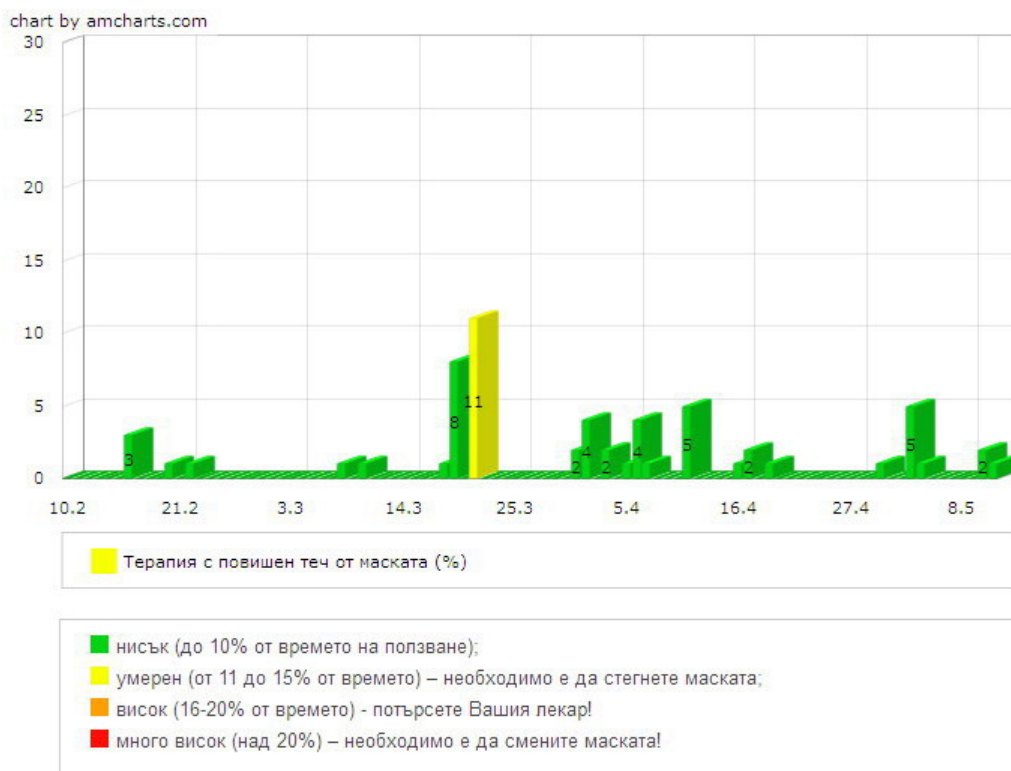

8. Ако отклоненията от нормата се задържат за продължителен период от време, следва да се обърнете към Вашия лекуващ лекар за консултация.

Пожелаваме Ви успешна терапия!
Екипът на Сън и Здраве ЕООД и СРАР-Bulgaria